


GARMIN®

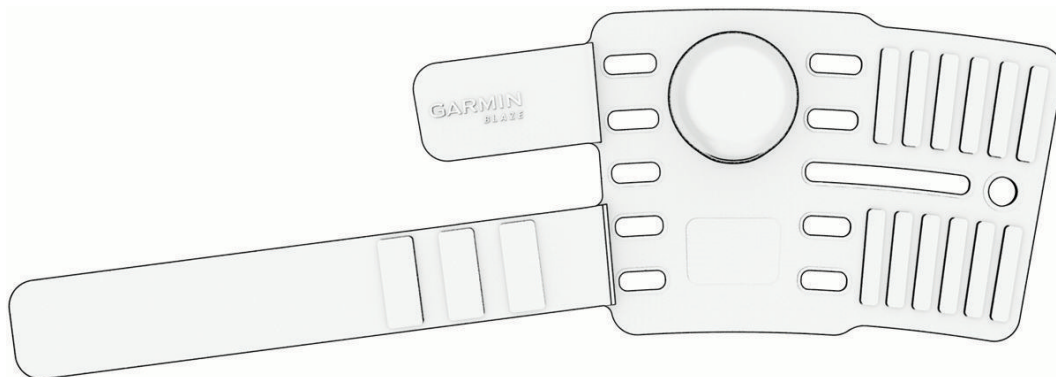

BLAZE™

מדריך למשתמש

© 2025 Garmin Ltd. או החברות הבנות שלה.

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Connect IQ™, Garmin Connect™, and Blaze™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04392, AA4392

תוכן עניינים

1. מבוא.....

- 1 Blaze לסוסים תחילת השימוש מערכת בריאות
- 1 סקירת ההתקן
- 2 נורית החיווי של החיישן
- 2 טעינת ההתקן
- 3 התקנת החיישן בכיסוי לזנב
- 4 הרכבת הכיסוי לזנב על הסוס
- 5 שיקולים הקשורים להתאמת הכיסוי לזנב

Blaze מערכת הבריאות לסוסים –

6. הוראות.....

- 6 Blaze והיישום Blaze
- 6 שיוך חיישן Blaze לטלפון
- 6 הגדרת פרופיל של סוס
- 7 התחלת פעילות ביישום Blaze
- 7 צפייה בפעילות ביישום Blaze
- 7 בחירת שם החיישן
- 7 חיישן Blaze ושעון Garmin שלך
- 7 הורדת תכונות של Connect IQ
- 8 שיוך חיישן Blaze לשעון
- 8 התחלת פעילות בשעון

8. פרטי ההתקן.....

- 8 מפרטים
- 8 טיפול בהתקן
- 9 ניקוי ההתקן
- 9 טיפים לניקוי ולאחסון
- 9 עדכוני מוצרים
- עדכון תוכנת ההתקן באמצעות היישום
- 9 Blaze
- 9 קבלת מידע נוסף

10. פתרון בעיות.....

- 10 עצות לנתוני דופק לא סדיר
- 10 האם שעון Garmin שלי תואם לחיישן Blaze?
- 10 הטלפון אינו מתחבר להתקן
- 10 חיישן Blaze לא מגיב
- 10 לא ניתן לבחור את החיישן עבור פעילות
- 10 הפעלה מחדש של החיישן
- 10 איפוס החיישן
- 10 כיצד לבדוק את רמת הסוללה?
- 11 הסרת חיישן

מבוא


אזהרה ⚠

עיין במדריך מידע חשוב על הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר. התייעץ תמיד עם הוורטרינר לפני השימוש במד דופק או לפני התחלה או שינוי של תוכנית אימונים כלשהי.

תחילת השימוש מערכת בריאות לסוסים Blaze

- 1 טען את ההתקן (טעינת ההתקן, עמוד 2).
- 2 הפעל את ההתקן (סקירת ההתקן, עמוד 1).
- 3 שייך את ההתקן ליישום Blaze בטלפון (שייך חיישן Blaze לטלפון, עמוד 6). היישום מאפשר לך לנהל את הסוסים והחיישנים, להתחיל פעילויות ולצפות בפעילויות בשידור חי.
- 4 בדוק אם יש עדכונים (עדכוני מוצרים, עמוד 9).
- 5 לחוויה הטובה ביותר יש לעדכן את התוכנה בהתקן. עדכוני תוכנה מספקים שינויים ושיפורים בפרטיות, באבטחה ובתכונות.
- 6 התקן את החיישן בכיסוי לזנב (התקנת החיישן בכיסוי לזנב, עמוד 3).
- 7 הרכב את הכיסוי לזנב על הסוס (הרכבת הכיסוי לזנב על הסוס, עמוד 4).
- 7 התחל פעילות (התחלת פעילות ביישום Blaze, עמוד 7).

סקירת ההתקן

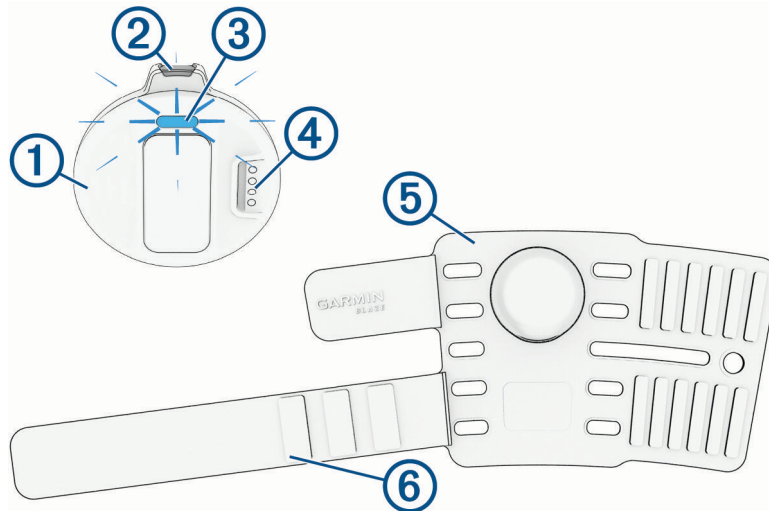

1	חיישן
2	לחצן ההתקן
3	נורית LED של מצב
4	יציאת טעינה
5	כיסוי לזנב
6	רצועת הארכה

נורית החיווי של החיישן

פעילות הנורית	מצב
הבהוב איטי בצבע כחול	החיישן מופעל אבל לא משוּיך.
הבהוב מהיר בצבע כחול	החיישן נמצא במצב שיוך.
הבהוב בירוק	החיישן מתקשר עם טלפון או שעון.
ירוק קבוע	החיישן במטען וטעון במלואו.
הבהוב איטי בצבע צהוב	החיישן בטעינה.
הבהוב איטי בצבע אדום	אירעה שגיאה או שהסוללה עומדת להתרוקן. אם הבעיה ממשיכה, יש לטעון את החיישן ולאחר מכן לאפס אותו (איפוס החיישן, עמוד 10).
צבע אדום קבוע	החיישן במצב איפוס (איפוס החיישן, עמוד 10).
לבן קבוע	החיישן בשלבי הפעלה, כיבוי או עדכון תוכנה.

טעינת ההתקן


הודעה

כדי למנוע קורוזיה, נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב. עיין בהוראות הניקוי (ניקוי ההתקן, עמוד 9).

ההתקן מופעל על-ידי סוללת ליתיום-יון מובנית שניתן לטעון באמצעות שקע סטנדרטי או יציאת USB במחשב.

הערה: ההתקן לא נטען מחוץ לטווח הטמפרטורות המאושר (מפרטים, עמוד 8).

1 צבט את ① של תפס הטעינה.

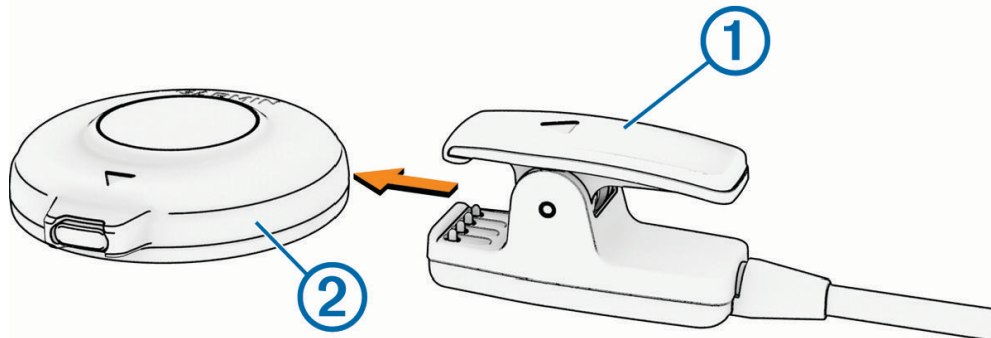

2 ישר את התפס עם המגעים בחלק האחורי של התקן ②.

3 חבר את כבל ה-USB למתאם AC או ליציאת USB של מחשב.


4 חבר את מתאם ה-AC לשקע רגיל.

5 המתן עד לטעינה מלאה של ההתקן.

נורית החיווי מהבהבת בצבע צהוב תוך כדי טעינה. נורית החיווי מאירה בצבע ירוק קבוע אחרי השלמת הטעינה.

התקנת החיישן בכיסוי לזנב

1 הנח את החיישן בכיסוי לזנב כך שהחץ בחיישן יהיה מיושר עם החץ בכיסוי לזנב.

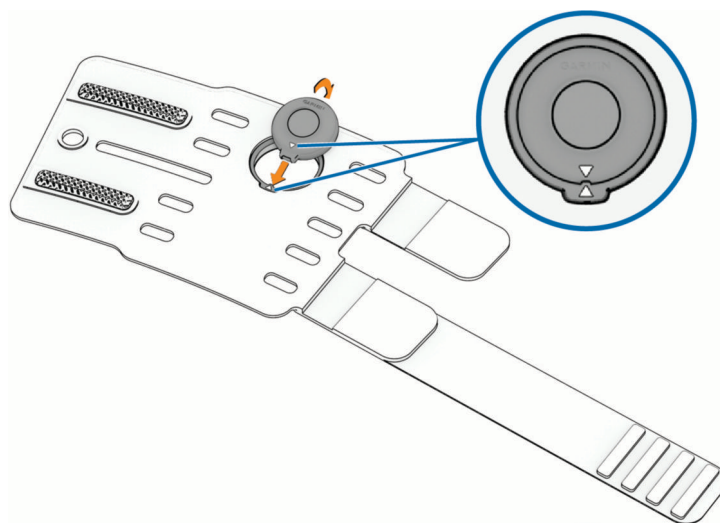

2 לחץ את החיישן לתוך הכיסוי לזנב.

הרכבת הכיסוי לזנב על הסוס

⚠️ זהירות

חלק מהסוסים עשויים לחוש גירוי בעור לאחר שימוש ממושך בכיסוי לזנב, במיוחד אם לסוס יש עור רגיש או שהוא סובל מאלרגיות. אם אתה מבחין בגירוי בעור, הסר את הכיסוי לזנב והנח לעור להחלים. כדי לסייע במניעת גירוי בעור, ודא שהכיסוי לזנב נקי ויבש, ואל תהדק אותו לזנב יתר על המידה. למידע נוסף, היכנס לאתר garmin.com/blazecare.


כדי למנוע אפשרות של גירויים בעור, אין להשתמש בכיסוי לזנב במשך יותר מ-10 שעות במהלך כל תקופה של 24 שעות. ההתקן אינו מיועד לשימוש של בני אדם. אל תנסה להשתמש בו על אף אדם.

הודעה

צמצם ככל האפשר את החשיפה לקרם הגנה, לאקונומיקה, לדוחה יתושים ולכימיקלים שנמצאים בסבונים מסוימים ובמשחות עזרה ראשונה. בפרט, פרופילן גליקול, דיפרופילן גליקול וחומצה אתילן-דיאמין-טטרה-אצטית (EDTA) יכולים להזיק לכיסוי לזנב.

לפני הרכבת הכיסוי לזנב על הסוס, ודא שהחיישן מונח היטב בכיסוי לזנב עם החצים מיושרים (התקנת החיישן בכיסוי לזנב, עמוד 3).

1 החלק את הכיסוי הפתוח מתחת לזנב של הסוס עד שהוא יהיה מיושר עם מרכז הזנב.

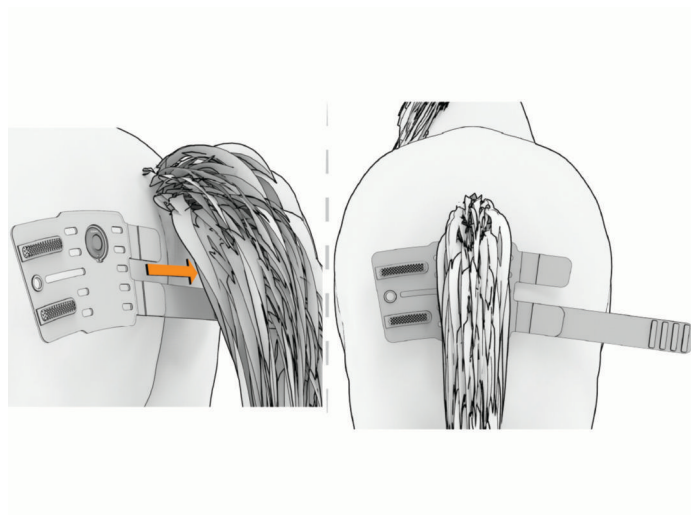


2 הדק את הכיסוי לזנב באמצעות שתי הרצועות הראשיות עם הסקוץ'.



3 לפף את רצועת ההארכה מסביב לכיסוי לזנב כמה פעמים לפי הצורך כדי להבטיח התאמה טובה וחבר אותה באמצעות הסקוץ'.



4 ודא שהכיסוי מורכב היטב על הזנב של הסוס.

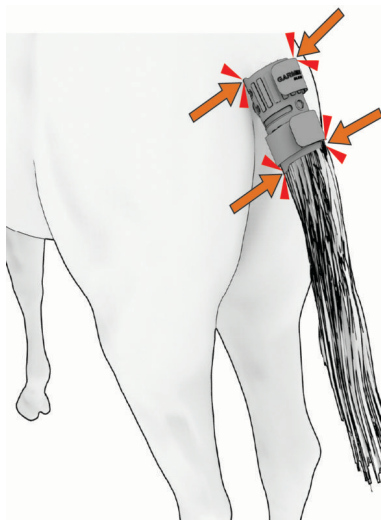

שיקולים הקשורים להתאמת הכיסוי לזנב

- בעת הרכבת מערכת הבריאות לסוסים Blaze על הזנב של הסוס, חשוב לקחת בחשבון את השיקולים הבאים לפני יציאה לרכיבה.
- ודא שהחיישן נמצא במרכז הצד התחתון של זנב הסוס.
- ודא שהכיסוי לזנב מורכב היטב והדוק.
- לפף את רצועת ההארכה מסביב לכל הכיסוי לזנב אחרי שהכיסוי לזנב מהודק.
- ודא שהלוגו Garmin® מוצג כשהצד הנכון פונה כלפי מעלה, בחלק הקדמי או האחורי של הזנב, בעת הרכבת הכיסוי לזנב על הסוס.
- ודא שהכיסוי לזנב נקי.
- העבר את רפידות הג'ל לאורך הכיסוי לזנב בתנועות ניגוב לפני כל שימוש.

Blaze מערכת הבריאות לסוסים – הוראות

חיישן Blaze והיישום Blaze

היישום Blaze מתחבר לחיישן Blaze באמצעות טכנולוגיה ומאפשר גישה לתכונות חיוניות.

- נהל את הסוסים והחיישנים שלך.
 - תעד פעילויות.
 - הצג את פרטי הפעילות.
 - צפה בפעילויות ציבוריות.
 - נהל את ההגדרות.
- ניתן להוריד את היישום Blaze מחנות היישומים בטלפון שלך.

שיור חיישן Blaze לטלפון

כדי להשתמש בתכונות המחוברות של מערכת הבריאות לסוסים Blaze, יש לשייך את החיישן ישירות דרך היישום Blaze ולא דרך הגדרות Bluetooth® בטלפון.

- 1 קרב את הטלפון התואם לטווח של 10 מ' מהחיישן.
- 2 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Blaze.
- 3 לחץ על הלחצן בחיישן כדי להפעיל אותו.
- 4 המתן עד שנורית החיווי בחיישן תהבהב בצבע כחול.
- 5 מהיישום, בחר $\oplus$ < Add Sensor ופעל בהתאם להוראות שמוצגות על המסך כדי לשייך את החיישן.

הגדרת פרופיל של סוס

ניתן לעדכן את השם, הגיל, הגובה, המשקל, המין, הסוג, יעדי הדופק להתאוששות ומזהה השבב של הסוס.

- 1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר $\oplus$ < Add Horse.
- 2 הזן את השם והגיל של הסוס.
- 3 בחר Save.
- 4 הזן כל מידע נוסף לגבי הסוס.
- 5 בחר Save.

עדכון פרופיל של סוס

- 1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר ••• < Manage Horses.
- 2 בחר סוס.
- 3 ערוך את הפרופיל.
- 4 בחר Save.

מחיקת פרופיל של סוס

- 1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר ••• < Manage Horses.
- 2 בחר סוס.
- 3 בחר $\vdots$ > Delete Horse > Delete All.

התחלת פעילות ביישום Blaze

1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר **Start Activity**.

2 בחר סוג פעילות.

3 בחר סוס.

4 בחר חיישן.

5 בחר אפשרות:

- כדי להשתמש ב-GPS בטלפון לצורך קבלת נתוני מהירות, נתוני מרחק ונתוני מפת פעילות מדויקים, בחר **Use this phone's location**.

- כדי להגדיר את הפעילות כך שהיא תהיה גלויה למשתמשים ביישום Blaze שנמצאים בקרבת מקום, בחר **Broadcast this activity**.

6 בחר **Continue** ופעל בהתאם להוראות שמוצגות על המסך.

הפסקת פעילות ביישום Blaze

מהיישום Blaze בטלפון, בחר **Stop** ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שמוצגות על המסך.

צפייה בפעילות ביישום Blaze

ניתן לצפות בפעילות של סוס אחר מהיישום Blaze. חיישן שמסדר פעילות באותה עת צריך להיות מורכב על הסוס, והוא צריך להיות בטווח של הטלפון שלך.

1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר **Live**.

2 בחר סוס כדי לצפות בפעילות.

בחירת שם החיישן

ניתן לבחור שם ייחודי לחיישן כדי שיהיה אפשר לזהות אותו בקלות.

1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר **Manage Sensors**.

2 ליד החיישן שברצונך לבחור לו שם, בחר **Name Sensor**.

3 הזן את השם של החיישן.

4 בחר **Done**.

חיישן Blaze ושעון Garmin שלך

ניתן להשתמש ביישום Blaze מהיישום Connect IQ™ בשעון Garmin התואם שלך כדי להתחיל פעילות ולהציג נתונים ביומטריים בזמן אמת של הסוס (<https://garmin.com/blazecompatibility>). ניתן להוסיף יישומי Connect IQ לשעון באמצעות חנות Connect IQ בשעון או בטלפון (garmin.com/connectiqapp).

הורדת תכונות של Connect IQ

לפני שתהיה לך אפשרות להוריד תכונות מהיישום Connect IQ, יש לשייך את השעון Garmin לטלפון החכם (שיוך חיישן Blaze לטלפון, עמוד 6). כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעיין במדריך למשתמש שמצורף לשעון.

1 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Connect IQ.

2 במידת הצורך, בחר את השעון שלך.

3 בחר תכונה של Connect IQ.

4 בצע את ההוראות שעל המסך.

שיוך חיישן Blaze לשעון

לפני שתוכל לשייך את החיישן לשעון, יש לשייך את החיישן ליישום Blaze בטלפון (שיוך חיישן Blaze לטלפון, עמוד 6), להוסיף סוס ליישום Blaze בטלפון (הגדרת פרופיל של סוס, עמוד 6), ולהוריד את היישום Blaze לשעון מחנות Connect IQ בשעון או בטלפון (הורדת תכונות של Connect IQ, עמוד 7).

- 1 לחץ על הלחצן בחיישן Blaze.
נורית החיווי מהבהבת בצבע כחול.
- 2 הערה: ודא שהמכשיר נמצא במרחק 10 מ' מחיישנים אלחוטיים אחרים תוך כדי השלמת תהליך השיוך.
- 3 פתח את היישום Blaze בשעון.
- 4 היישום מחפש את החיישן באופן אוטומטי.
- 3 בחר את החיישן.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

התחלת פעילות בשעון

- 1 פתח את רשימת הפעילויות בשעון Garmin התואם.
 - 2 בחר **Start Activity > Blaze**.
 - 3 אם זו הפעם הראשונה שבה אתה מתחיל פעילות או אם שייכת כמה חיישנים, בחר את החיישן שלך.
 - 4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשייך את החיישן.
 - 5 בחר סוג פעילות.
 - 6 בחר ✓ כדי לשדר את הפעילות. הפעולה הזו גורמת לכך שהפעילות תהיה גלויה למשתמשי היישום Blaze שנמצאים בקרבתך.
 - 7 בצע את ההוראות שעל המסך.
- ההתקן מתעד נתוני פעילות רק בשעה שטיימר הפעילות עובד.

פרטי ההתקן

מפרטים

סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית
חיי הסוללה	עד 25 שעות
טווח טמפרטורות הפעלה	מ-10°C ל-60°C (מ-14°F ל-140°F)
טווח טמפרטורות טעינה	מ-3°C עד 47°C (מ-37°F עד 117°F)
תדר אלחוטי	4GHz @ 19.8dBm.2 מרבי
דירוג עמידות במים	IEC 60529 IPX7 ¹

טיפול בהתקן

הודעה

הקפד לשמור על ניקיון הרכיבים.

אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן.

הימנע משימוש בחומרים כימיים, בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי חרקים שעלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי.

אל תטבול את החלקים ואל תשטוף אותם באמצעות לחץ מים.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות למשך זמן ממושך, משום שזה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

החלף רכיבים בחלקים של Garmin בלבד. פנה לספק Garmin או לאתר Garmin.

¹ ההתקן יעמוד בטבילה מקרית במים בעומק של עד מטר אחד למשך 30 דקות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.

ניקוי ההתקן

- 1 הסר את החיישן מהכיסוי לזנב.
- 2 נקה את פני השטח של החיישן באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה או במים נקיים.
- 3 השתמש במברשת רכה ובאלכוהול איזופרופיל כדי לנקות לכלוך מנקודות המגע של הטעינה בחיישן.

הודעה

אין להשתמש בחפצים חדים כדי לנקות את ההתקן ואסור להחדיר חפצים לתוך פתחים ביחידה.

- 4 נגב את החיישן כדי לייבש אותו.
- 5 שטוף את הכיסוי לזנב ביד באמצעות דטרגנט עדין.
- 6 תלה את הכיסוי לזנב לייבוש.

טיפים לניקוי ולאחסון

הודעה

צמצם ככל האפשר את החשיפה לקרם הגנה, לאקונומיקה, לדוחה יתושים ולכימיקלים שנמצאים בסבונים מסוימים ובמשחות עזרה ראשונה. פרופילן גליקול, דיפרופילן גליקול וחומצה אתילן-דיאמין-טטרה-אצטית (EDTA) יכולים להזיק לכיסוי לזנב.

- בעת אחסון הכיסוי לזנב, תלה אותו או הנח אותו פרוס על משטח.
- אין לקפל את הכיסוי לזנב או לגלגל אותו בצורה הדוקה.
- אין לאחסן את החיישן או הכיסוי לזנב כשהוא חשוף לאור שמש ישיר או בטמפרטורות קיצוניות.
- אין לנקות את החיישן או הכיסוי לזנב באמצעות אקונומיקה ואין לטבול אותו בחומרי ניקוי כלשהם.
- אין להשתמש במגבוני חיטוי או במגבוני אלכוהול איזופרופיל על רפידות הג'ל.
- ניתן להשתמש במגבון אלכוהול איזופרופיל 70% כדי לנגב בעדינות את החלק החיצוני של החיישן והכיסוי לזנב.
- ניתן להשתמש במגבון חיטוי כדי לנגב בעדינות את החלק החיצוני של החיישן והכיסוי לזנב, אבל ההמלצה של Garmin היא לשטוף את החיישן והכיסוי לזנב במים כדי להסיר את כל שאריות הכימיקלים מהמגבונים ולמנוע אפשרות של גירויים בעור.

עדכוני מוצרים

המכשיר שלך בודק אוטומטית אם קיימים עדכונים בעת שיוך לטלפון עם טכנולוגיית Bluetooth. באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים באופן ידני מהגדרות המערכת. בטלפון, התקן את היישום Blaze. דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני Garmin.

- עדכוני תוכנה
- העלאות נתונים ליישום Blaze בטלפון שלך
- רישום מוצר

עדכון תוכנת ההתקן באמצעות היישום Blaze

- 1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר **Manage Sensors**.
- 2 בחיישן שברצונך לעדכן, בחר **Software Update Available**.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.

קבלת מידע נוסף

- לקבלת מדריכים, מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים, עבור לכתובת support.garmin.com.
- כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף, עבור לכתובת buy.garmin.com או פנה לספק Garmin שלך.

פתרון בעיות

עצות לנתוני דופק לא סדיר

- אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.
- יש לנקות ולייבש את הזנב של הסוס והאזור שמסביבו לפני הרכבת הכיסוי לזנב.
 - אין למרוח קרם הגנה, קרח לחות וחומר דוחה חרקים מתחת לחיישן.
 - הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב ההתקן.
 - ודא שהכיסוי לזנב הדוק היטב אבל לא גורם תחושת אי נוחות.
 - שטוף את החיישן במים נקיים אחרי כל פעילות.

האם שעון Garmin שלי תואם לחיישן Blaze?

חיישן Blaze תואם לכמה שעוני Garmin.

כדי לקבל מידע לגבי תאימות, ניתן לעבור לאתר <https://garmin.com/blazecompatibility>.

הטלפון אינו מתחבר להתקן

- קרב את ההתקן למרחק 10 מ' מהטלפון.
- אם ההתקנים כבר משויכים, כבה את טכנולוגיית Bluetooth בטלפון ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
- אם ההתקנים שלך כבר משויכים, הסר את חיישן Blaze מהגדרות של Bluetooth בטלפון ולאחר מכן שייך את ההתקנים מחדש.
- אם ההתקנים שלך לא משויכים, הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בטלפון החכם.
- בטלפון, פתח את היישום Blaze ובחר $\oplus$ < Add Sensor כדי לעבור למצב שיוך.

חיישן Blaze לא מגיב

- אם אתה מתקשה לחבר את חיישן Blaze ליישום Blaze, ניתן לנסות את האפשרויות הבאות.
- ודא שהחיישן טעון ומופעל (**כיצד לבדוק את רמת הסוללה?**, עמוד 10).
 - ודא שהחיישן נמצא בטווח טמפרטורות הפעולה המאושרות (**מפרטים**, עמוד 8).
 - כבה את החיישן ולאחר מכן הפעל אותו מחדש (**סקירת ההתקן**, עמוד 1).

לא ניתן לבחור את החיישן עבור פעילות

- אם החיישן גלוי אבל אין אפשרות לבחור אותו, ייתכן שיש צורך לחבר את החיישן מחדש.
- מהיישום Blaze בטלפון, בחר $\bullet\bullet\bullet$ < Manage Sensors ולאחר מכן בחר **Reconnect** בחיישן.

הפעלה מחדש של החיישן

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן עד שנורית החיווי תהבהב בצבע לבן אחיד.
- 2 לחץ על הלחצן כדי להפעיל את החיישן.

איפוס החיישן

- לפני איפוס החיישן, מומלץ להפעיל את החיישן מחדש כדי להימנע ממחיקה של נתונים והגדרות (**הפעלה מחדש של החיישן**, עמוד 10).
- ניתן לאפס את הגדרות החיישן לערכי ברירת המחדל של היצרן ולהסיר את כל הנתונים השמורים.
- 1 לחץ על לחצן ההתקן שלוש פעמים ברצף.
 - 2 בזמן שנורית החיווי מאירה באדום, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההתקן עד שנורית החיווי תתחיל להאיר בצבע לבן.

כיצד לבדוק את רמת הסוללה?

- מהיישום Blaze בטלפון, בחר $\bullet\bullet\bullet$ < Manage Sensors.
- רמת הסוללה מוצגת מתחת לשם החיישן.

הסרת חיישן

- 1 מהיישום Blaze בטלפון, בחר **Manage Sensors** < •••
- 2 בחיישן שברצונך להסיר, בחר **Remove Sensor** < ⋮

